

m7(3'OMeG)(5')pp
p(5')(2'OMeA)pG
(Cap-AG(3' OMe))
铵盐溶液, 100mM



成为世界一流的特种酶产品与服务提供商
info@hzymes.com
www.hzymes.com

说明书版本号: V1.1

产品信息


产品名称	货号	包装规格
m7(3'OMeG)(5')ppp(5') (2'OMeA)pG (Cap-AG(3' OMe))铵盐溶液, 100mM	HBP003700	0.05 mL
	HBP003701	1 mL
	HBP003702	20 mL
	HBP003703	100 mL
	HBP003704	500 mL

产品描述

本品用于体外转录过程中, 在 mRNA 5' 端加帽形成 Cap 1 结构。相比于 Cap 0 结构 (ARCA 和 mCap 加帽), 带有 Cap 1 结构的 mRNA 对于哺乳动物系统更适合, 并且具有更高的转录效率。

产品性质

检测指标	参数
外观	无色透明液体
浓度	100mM±3%
纯度 (HPLC)	≥95%
pH(22~25°C)	6.2±0.2

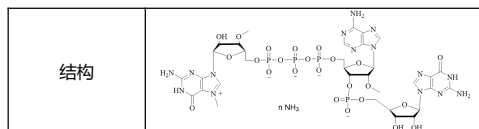

运输与保存方法

储存稳定性: -25 ~ -15°C

运输稳定性: ≤0°C

注意事项

- 请将其于冰上溶解, 并小心防止 RNase 污染降解, 使用后, 应立即储存于 -25 ~ -15°C。
- 尽可能避免反复冻融, 不要涡旋震荡。
- 为了您的安全和健康, 请穿戴实验服和一次性手套进行操作。