


6.5 min闪电般完成样本处理 核酸提取解决方案

产品优势


- 6.5 min完成提取全流程,为分子POCT检测提供闪电速度
- 体系鲁棒性好,最大兼容400 μ L样本处理量
- 提出效率高,最低10 copies可保证提取效果,降低样本检测假阴率
- 提供预分装与OEM大包装形式

测试数据

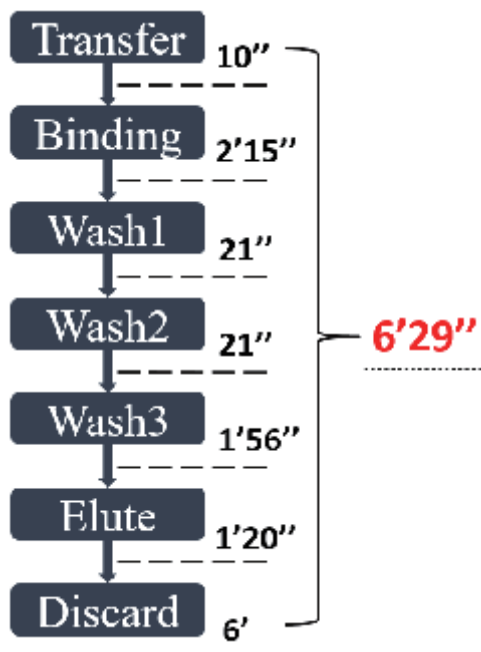


提取时间设定及时间

拥有最短的核酸提取时间,
仅用时6.5 min就能完成核酸高质量提取。

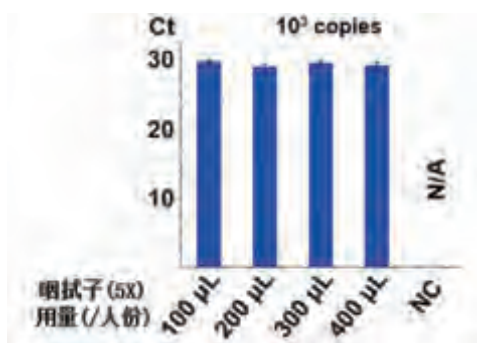


核酸提取试剂盒检测范围

适应宽样品量范围, 能够实现400 μL 样本量稳定提取。

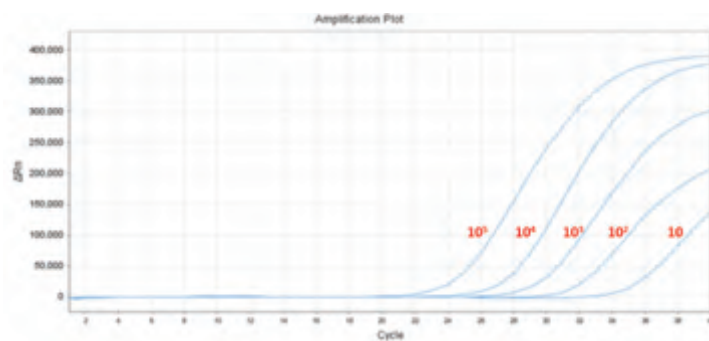

COVID-19 假病毒梯度样本扩增曲线

对 10^1 - 10^5 copies病毒样本均具有较好提取效果。

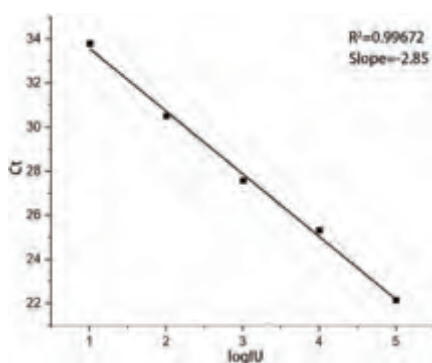

线性范围测试

在10000倍的样本浓度区间内拥有良好线性范围。

订购信息

货号	产品名称	样本类型	提取时间
HMD3501	核酸提取试剂盒(性能版)	鼻咽拭子、血液样本、唾液、尿液等, 多种液体样本通用	22 min
HMD3502	核酸提取试剂盒(简易版)	鼻咽拭子、唾液、尿液等液体样本	16 min
HMD3503	核酸提取试剂盒(快速版)	鼻咽拭子、唾液、尿液等液体样本	6.5 min
HMD3401	核酸提取羧基磁珠	普通样本	
HMD3403	核酸提取羟基磁珠(低蛋白吸附)	含高杂蛋白杂质样本	

瀚海新酶生物科技有限公司

地址: 武汉市东湖新区高新大道666号C6栋3号楼

地址: 上海市奉贤区沪杭公路1588号凤创谷3号楼7楼

网址: www.hzymes.com

电话: 027-65528952

电话: 021-60877362

